

Mirage Quattro™

MASQUE FACIAL

TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE

Convient à la majorité des patients : le masque facial Mirage Quattro convient à plus de 95 % des utilisateurs*.

Bulle Mirage™ à double jupe élastique : la technologie de la Bulle Mirage Resmed assure l'étanchéité et s'adapte aux mouvements des patients, pour un confort amélioré.

Molette de réglage MicroFit : le réglage du support frontal permet de personnaliser l'ajustement et le confort.

Léger, silencieux et facile à utiliser : ces avantages sont optimisés par la rationalisation du design, l'amélioration des orifices de ventilation et une variété de caractéristiques pensées pour l'utilisateur du masque.

La molette de réglage MicroFit

améliore l'ajustement, l'étanchéité et le confort pour plus de 95 % des utilisateurs*

Les fentes du harnais Set-and-forget

permettent de conserver les réglages d'ajustement une fois qu'ils ont été définis

Orifices de ventilation intégrés et améliorés

leur conception et leur emplacement permettent de réduire le bruit

La membrane de la bulle est mobile au niveau de l'arête nasale,

s'adaptant ainsi à différentes formes de nez et empêchant les fuites d'air vers les yeux

Les clips de la bulle avec attaches

permettent de facilement désolidariser la bulle de l'entourage rigide

La bulle Mirage à double jupe élastique

améliore l'étanchéité en cas de mouvements du visage


La membrane de la bulle est mobile au niveau du menton,

assurant ainsi l'étanchéité et autorisant les mouvements de la mâchoire et son relâchement

Les clips du harnais Set-and-forget

facilitent le retrait du masque

Coude simplifié avec valve anti-asphyxie (VAA) et un nombre réduit de composants pour faciliter le montage et le démontage ; la VAA est conçue pour améliorer la sécurité en cas de blocage de l'arrivée d'air au masque

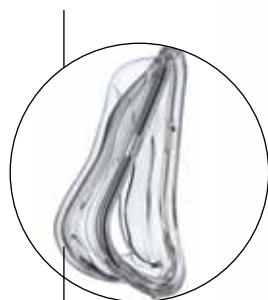

La membrane telle qu'elle se présente sur la vue latérale de la bulle





GROS PLAN TECHNOLOGIQUE

Molette de réglage MicroFit :

Choix de 24 positions au bout des doigts : ajustement efficace et confortable pour plus de 95 % des utilisateurs*

- **Ajustable** : peut s'ajuster même sur le visage de l'utilisateur
- **Précis** : chaque tour de molette permet d'affiner l'ajustement du support frontal
- **Progressif** : s'avance vers le visage, permettant à l'utilisateur de déterminer quand l'ajustement lui convient le mieux
- **Fonctionne parallèlement à la bulle** : la bulle s'adapte au visage au fur et à mesure de l'ajustement de l'angle du masque à l'aide de la molette, et procure ainsi une étanchéité améliorée là où cela est le plus important, sans serrage excessif du harnais

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

Confort personnalisé

- La molette de réglage MicroFit permet d'ajuster le masque en fonction des particularités du visage de l'utilisateur
- La bulle à double jupe élastique épouse les contours du visage et autorise les mouvements pendant le sommeil (y compris le relâchement de la mâchoire).

Légèreté et silence

- Dimensions, matières utilisées, tout concourt à la légèreté du masque
- L'amélioration de la conception et de l'emplacement des orifices de ventilation réduit le bruit

Facilité d'emploi

- La molette de réglage MicroFit et la bulle élastique permettent d'obtenir un ajustement adapté dès la première tentative
- Réduction du nombre de composants pour faciliter la manipulation, le nettoyage, le montage et le démontage

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS

Convient à plus de 95 % des utilisateurs*

- La molette de réglage MicroFit et la bulle élastique permettent au masque d'épouser les contours de visage les plus variés

Satisfaction et observance des utilisateurs

- Le kit d'information complet prévu pour l'utilisateur comprend un sac de transport, un DVD sur l'entretien et la mise en place du masque, un guide de mise en place et un guide utilisateur
- L'ajustement personnalisé obtenu dès la première tentative facilitera l'acceptation du traitement
- Simplification des composants pour un montage et un démontage faciles

Optimisation des coûts et du temps

- Réduction des stocks : 3 fois moins de codes produit qu'avec le masque facial Ultra Mirage™ et une réduction du nombre de composants
- Réduction du temps d'ajustement et de formation : l'amélioration de la technologie de la bulle se traduit par une étanchéité plus rapide
- Réduction du nombre de plaintes et de retours grâce à la facilité d'utilisation et d'ajustement

Code produit

Masque facial Mirage Quattro

France

Très petit (XS)	61220
Petit (S)	61221
Médium (M)	61222
Large (L)	61223

* Source : données anthropométriques internes de ResMed

Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA - [CE/REP] ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK - ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde.

Mirage™ Quattro - Indications : Masque facial destiné à acheminer au patient de façon non invasive le débit d'air produit par un appareil de pression positive continue (PPC) ou d'aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire positive). Utilisation par des patients adultes à qui une pression positive a été prescrite. Usage multiple par un seul patient à domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu hospitalier - **Dispositif médical de classe** : IIa - **Evaluation de la conformité par** : TÜV123 - **Bon usage** : Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif. **Remboursement** : Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameil.fr. © 2013 ResMed Ltd. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. 1011404/Z 2013 05