

Mirage Quattro™

FULL FACE MASKE

TECHNOLOGIE DER VIERTEN GENERATION

Großer Passbereich: Die vierte Generation der ResMed Full Face Masken passt mehr als 95% aller Benutzer.*

Doppelwandiges Mirage™-Maskenkissen mit

Luftfedertechnologie: Einzigartiges Maskenkissen erlaubt die Bewegung im Schlaf und ist eine wirksame Lösung für Patienten, die im Schlaf das Kinn fallen lassen bzw. den Mund öffnen..

MicroFit-Regler: Neue Stirnstützenanpassung sorgt für patientenspezifischen Sitz und Komfort.

Leicht, leise und anwenderfreundlich: Diese Leistungsmerkmale werden durch modernes Maskendesign, verbessertes Design der Luftauslassöffnungen und eine Reihe von anwenderfreundlichen Features optimiert.

MicroFit-Regler

Sorgt bei 95% aller Benutzer für bessere Passform und Abdichtung sowie für besseren Sitz und höheren Komfort*.

Verbesserte integrierte Luftauslassöffnungen

Sorgen für ein minimales Geräuschniveau.

Maskenkissenclip mit Laschen


Erleichtert das Abnehmen des Kissens vom Maskenrahmen.

Bewegliche Kissenmembran am Kinn

Bewahrt den Sitz und gleicht Kieferbewegungen und Fallenlassen des Kinns aus.



Die Membran bei einer Seitenansicht des Maskenkissens

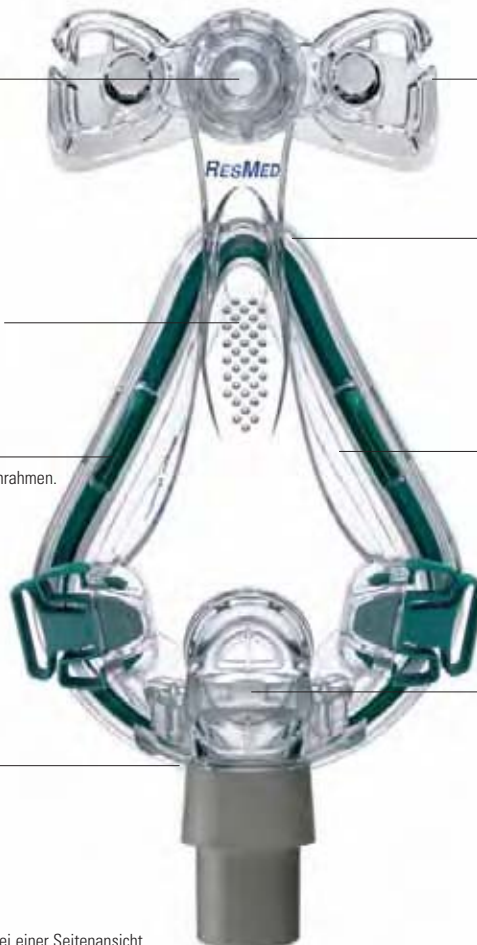

Kopfbandschlitz

Beibehaltung optimaler Einstellungen des oberen Kopfbands.

Bewegliche Kissenmembran am Nasenrücken

Ermöglicht Patienten mit unterschiedlichen Nasenformen die Benutzung und verhindert Leckagen in die Augen.

Doppelwandiges Mirage-Maskenkissen mit Luftfedertechnologie

Verbessert den Sitz an den wichtigsten Stellen.

Kopfbandclips

Ermöglichen das praktische Abnehmen der Maske.

Vereinfachtes Kniestück mit Sicherheitsventil

Weniger Kniestückteile für einfachen Zusammen- und Auseinanderbau; Sicherheitsventil erhöht die Sicherheit, wenn der Luftfluss in die Maske behindert wird.



TECHNISCHES HIGHLIGHT

MicroFit-Regler

Eine Auswahl an 24 Positionen – sorgt bei 95% aller Benutzer* für einen komfortablen und bewirksam wirkenden Sitz.

- **Anpassungsfähig:** Kann auf dem Gesicht des Benutzers angepasst werden.
- **Präzise:** Durch Drehung des Reglers wird die Stirnstütze in kleinen Schritten verstellt.
- **Schritt für Schritt:** Schmiegt sich an das Gesicht des Benutzers an und gibt ihm so die Möglichkeit, den besten Sitz zu spüren.
- **In Kombination mit dem Maskenkissen:** Während mit dem Regler der Winkel zum Gesicht geändert wird, passt sich das Maskenkissen entsprechend an, um den Sitz an den erforderlichen Stellen zu optimieren – ganz ohne strammes Anziehen des Kopfbandes.

VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN

Individueller Komfort

- MicroFit-Regler ermöglicht die genaue Anpassung an das Gesicht.
- Doppelwandiges Maskenkissen mit Luftfedertechnologie passt sich den Gesichtskonturen genau an und erlaubt Bewegungen im Schlaf (einschließlich Fallenlassen des Kinns).

Leicht und leise

- Modernes Design, das sich leicht auf dem Gesicht anfühlt.
- Verbessertes Design der Luftauslassöffnung reduziert das Geräuschniveau.

Anwenderfreundlich

- MicroFit-Regler und Luftfedertechnologie sorgen für einen guten Sitz – beim ersten Mal und jedes Mal danach.
- Weniger Bestandteile sorgen für einfache Handhabung und problemlosen Zusammen- und Auseinanderbau.

VORTEILE FÜR DEN MEDIZINER UND FACHHÄNDLER

Passbereich auf 95% aller Patienten angestiegen*

- MicroFit-Regler und Luftfedertechnologie ermöglichen Maskenanpassung an mehr Patienten.
- Neue XS Maskengröße.

Kundenzufriedenheit und Compliance

- Umfassende Informationen für den Patienten – mit Reisetasche, DVD zur Maskenpflege, Kurzanleitung zur Anpassung und Gebrauchsanweisung.
- Höhere Therapieakzeptanz durch sicheren Sitz beim ersten Anpassen.
- Individuelle Passform, Komfort und Abdichtung fördern die langfristige Compliance.
- Vereinfachte Teile ermöglichen schnellen und einfachen Zusammen- und Auseinanderbau.

Kosten- und Zeiteinsparungen

- Weniger Inventar: 33% weniger Artikelnummern als die Ultra Mirage™ Full Face Maske sowie weniger Maskenteile.
- Kürzere Anpassungs- und Schulungszeit: Verbesserte Maskenkisstechnologie sorgt für schnellen, sicheren Sitz.
- Weniger Rückrufe: Einfache Anwendung und Anpassung.

ARTIKELNUMMERN

Mirage Quattro Full Face Maske

| Europa 1 ¹ | |
|-----------------------|-------|
| X-Small | 61204 |
| Small | 61205 |
| Medium | 61206 |
| Large | 61207 |

| Europa 2 ² | |
|-----------------------|-------|
| X-Small | 61208 |
| Small | 61209 |
| Medium | 61210 |
| Large | 61211 |

| Europa 3 ³ | |
|-----------------------|-------|
| X-Small | 61228 |
| Small | 61229 |
| Medium | 61230 |
| Large | 61231 |

| Frankreich | |
|------------|-------|
| X-Small | 61220 |
| Small | 61221 |
| Medium | 61222 |
| Large | 61223 |

| Großbritannien | |
|----------------|-------|
| X-Small | 61224 |
| Small | 61225 |
| Medium | 61226 |
| Large | 61227 |

| Asien-Pazifik | |
|---------------|-------|
| X-Small | 61216 |
| Small | 61217 |
| Medium | 61218 |
| Large | 61219 |

| Australien/Neuseeland | |
|-----------------------|-------|
| X-Small | 61212 |
| Small | 61213 |
| Medium | 61214 |
| Large | 61215 |

¹ Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Holländisch

² Englisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Ungarisch, Polnisch und Griechisch

³ Englisch, Russisch, Türkisch, Tschechisch, Estnisch, Slowenisch, Slowakisch, Bulgarisch, Rumänisch, Lettisch und Litauisch

* Quelle: Interne, anthropometrische ResMed-Daten