

## Mirage Quattro™

ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

**Μεγάλο εύρος εφαρμογής:** η μάσκα τέταρτης γενιάς για ολόκληρο το πρόσωπο από τη ResMed εφαρμόζει στο 95% των χρηστών τουλάχιστον.\*

**Μαξιλάρι διπλού τοιχώματος Mirage™ με ανακουφιστική τεχνολογία:** μοναδικό μαξιλάρι που παραλαμβάνει την κίνηση κατά τον ύπνο και προσφέρει αποτελεσματική λύση στην πτώση του σαγονιού.

**Επιλογέας MicroFit:** η νέα ρύθμιση του στηρίγματος μετώπου προσφέρει εξατομικευμένη εφαρμογή και άνεση.

**Ελαφριά, αθόρυβη και εύχρηστη:** αυτά τα οφέλη βελτιστοποιούνται με την απλή σχεδίαση της μάσκας, τη βελτιωμένη σχεδίαση του εξαερισμού και μια σειρά φιλικών προς το χρήστη χαρακτηριστικών.

#### Επιλογέας MicroFit

παρέχει καλύτερη εφαρμογή, σφράγιση και άνεση στο 95% των χρηστών τουλάχιστον\*

#### Βελτιωμένα ενσωματωμένα ανοίγματα εξαερισμού

παρέχουν εξαγωγή με ελάχιστο θόρυβο

#### Συνδετήρας μαξιλαριού με προεξοχές


επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του μαξιλαριού από το πλαίσιο

#### Κινητή μεμβράνη μαξιλαριού στο πηγούνι

διατηρεί τη σφράγιση και παραλαμβάνει την πτώση και την κίνηση του σαγονιού



Η μεμβράνη όπως φαίνεται στην πλάγια όψη του μαξιλαριού της μάσκας

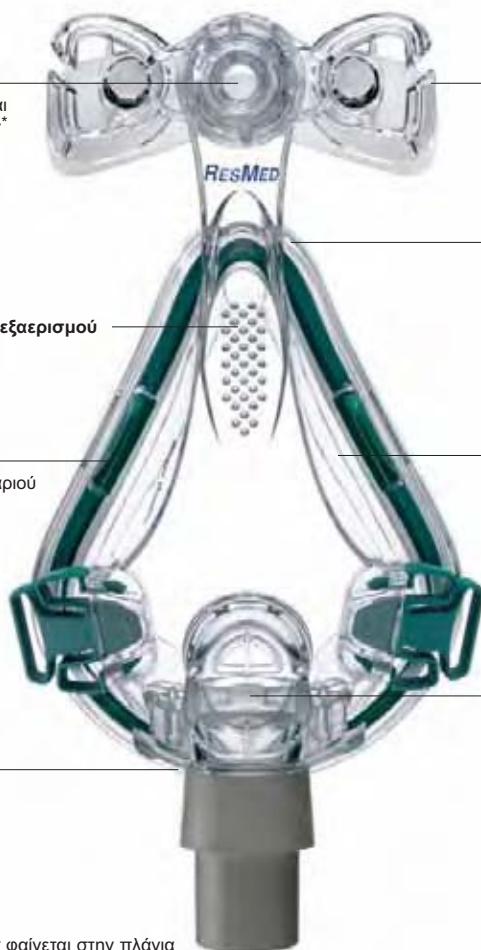

**Σχισμές κεφαλοδέτη που δεν απαιτούν συνεχείς ρυθμίσεις** διατηρούν τις ρυθμίσεις βέλτιστης εφαρμογής

**Κινητή μεμβράνη μαξιλαριού στη γέφυρα της μύτης** υποδέχεται διάφορους τύπους ρινικών δομών και εμποδίζει τη διαρροή προς τα μάτια

**Μαξιλάρι διπλού τοιχώματος Mirage με ανακουφιστική τεχνολογία** ενισχύει τη σφράγιση εκεί που χρειάζεται περισσότερο

**Συνδετήρες κεφαλοδέτη που δεν απαιτούν συνεχείς ρυθμίσεις** επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεση της μάσκας

**Απλοποιημένο γωνιακό εξάρτημα με αντιασφυγιγόνο βαλβίδα (AAV)** λίγα κομμάτια για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Η βαλβίδα AAV ενισχύει την ασφάλεια όταν η ροή αέρα προς τη μάσκα εμποδίζεται



## ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

### Επιλογέας MicroFit

Δυνατότητα επιλογής 24 θέσεων στα δάχτυλά σας – παρέχεται άνετη, αποτελεσματική εφαρμογή για το 95% των χρηστών τουλάχιστον\*

- **Ρυθμιζόμενος:** μπορεί να ρυθμιστεί όταν είναι στο πρόσωπο του χρήστη
- **Ακριβής:** κάθε στροφή του επιλογέα προσαρμόζει το στήριγμα μετώπου σε μικρά βήματα
- **Προοδευτική ρύθμιση:** κινείται προς το πρόσωπο, επιτρέποντας στον χρήστη να αντιληφθεί τότε έχει επιτευχθεί η πιο κατάλληλη εφαρμογή για το πρόσωπό του
- **Λειτουργεί σε συνδυασμό με το μαξιλάρι:** καθώς ο επιλογέας ρυθμίζει τη γωνία της μάσκας στο πρόσωπο, το μαξιλάρι προσαρμόζεται ώστε να ενισχύει τη σφράγιση εκεί που χρειάζεται περισσότερο – χωρίς να απαιτείται υπερβολικό σφίξιμο του κεφαλοδέτη

## ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

### Εξατομικευμένη άνεση

- Ο επιλογέας MicroFit ρυθμίζει τη μάσκα ώστε να ταιριάζει με το προφίλ του χρήστη
- Το μαξιλάρι διπλού τοιχώματος με ανακουφιστική τεχνολογία προσαρμόζεται στο περίγραμμα του προσώπου και παραλαμβάνει την κίνηση κατά τον ύπνο (συμπεριλαμβανομένης της πτώσης του σαγονιού)

### Ελαφριά και αθόρυβη

- Απλή σχεδίαση που δεν βαραίνει στο πρόσωπο
- Βελτιωμένη σχεδίαση εξαιρισμού που μειώνει το θόρυβο

### Όλα γίνονται πιο εύκολα

- Ο επιλογέας MicroFit και η ανακουφιστική τεχνολογία μαξιλαριών βοηθούν να επιτευχθεί καλή εφαρμογή της μάσκας – την πρώτη φορά, κάθε φορά
- Λιγότερα κομμάτια για εύκολο χειρισμό, καθαρισμό, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

### Το εύρος εφαρμογής αυξήθηκε στο 95% των χρηστών τουλάχιστον\*

- Ο επιλογέας MicroFit και η ανακουφιστική τεχνολογία μαξιλαριών ρυθμίζουν τη μάσκα ώστε να εφαρμόζει σε περισσότερες δομές προσώπων
- Νέο πολύ μικρό (XS) μέγεθος μάσκας

### Ικανοποίηση και συμμόρφωση του πελάτη

- Περιεκτικό πακέτο υποστήριξης χρήστη με τσάντα μεταφοράς, DVD για τη φροντίδα της μάσκας, οδηγίες γρήγορης εφαρμογής και οδηγίες χρήσης
- Αυξημένη αποδοχή θεραπειας μέσω της εφαρμογής από την πρώτη φορά
- Η εξατομικευμένη εφαρμογή, άνεση και σφράγιση ενθαρρύνουν τη μακροχρόνια συμμόρφωση
- Απλοποιημένα κομμάτια για γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση

### Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου

- Μειωμένος αριθμός εξαρτημάτων: 33% λιγότεροι κωδικοί προϊόντων σε σύγκριση με τη μάσκα για ολόκληρο το πρόσωπο Ultra Mirage™ και λιγότερα κομμάτια για τη μάσκα
- Μειωμένος χρόνος εφαρμογής και εκπαίδευσης: η βελτιωμένη τεχνολογία μαξιλαριών επιτρέπει τη γρήγορη σφράγιση
- Μειωμένες επιστροφές για διορθώσεις: εύκολη στη χρήση και στην εφαρμογή

## ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μάσκα για ολόκληρο το πρόσωπο Mirage Quattro

Ευρώπη 1 <sup>1</sup>	
Πολύ μικρή	61204
Μικρή	61205
Μεσαία	61206
Μεγάλη	61207

Ευρώπη 2 <sup>2</sup>	
Πολύ μικρή	61208
Μικρή	61209
Μεσαία	61210
Μεγάλη	61211

Ευρώπη 3 <sup>3</sup>	
Πολύ μικρή	61228
Μικρή	61229
Μεσαία	61230
Μεγάλη	61231

Γαλλία	
Πολύ μικρή	61220
Μικρή	61221
Μεσαία	61222
Μεγάλη	61223

Αγγλία	
Πολύ μικρή	61224
Μικρή	61225
Μεσαία	61226
Μεγάλη	61227

Ασία-Ειρηνικός	
Πολύ μικρή	61216
Μικρή	61217
Μεσαία	61218
Μεγάλη	61219

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία	
Πολύ μικρή	61212
Μικρή	61213
Μεσαία	61214
Μεγάλη	61215

<sup>1</sup> Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά και Ολλανδικά  
<sup>2</sup> Αγγλικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Δανικά, Φινλανδικά, Ουγγρικά, Πολωνικά και Ελληνικά  
<sup>3</sup> Αγγλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Τσεχικά, Εσθονικά, Σλοβενικά, Σλοβακικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Λετονικά και Λιθουανικά

\* Πηγή: εσωτερικά ανθρωπομετρικά δεδομένα της ResMed

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ή 1 800 424 0737 (χωρίς χρέωση), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 ή 1 800 658 189 (χωρίς χρέωση). Γραφεία της ResMed σε Αυστρία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Μαλαισία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Σγκαπούρη, Σουηδία, Φινλανδία, Χονγκ Κονγκ (δείτε τον δικτυακό τόπο για περισσότερες πληροφορίες). Προστασία από διπλώματα ευρεσιτεχνίας: AU 777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594, US 6701927, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας υπό κατοχύρωση. Προστασία με καταθέσεις σχεδίων: AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU 499173, EU 559208, NZ 407770. Άλλα σχέδια υπό κατοχύρωση. Τα Mirage, Mirage Quattro και Ultra Mirage είναι εμπορικά σήματα της ResMed Ltd και η ονομασία Mirage είναι καταχωρισμένη στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ. © 2007 ResMed Ltd. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 1011413/1 07 03