

Mirage Quattro™

ОРОНАЗАЛЬНАЯ МАСКА

ТЕХНОЛОГИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ

Широкий спектр установки: оронозальная маска четвертого поколения фирмы ResMed подходит для более 95% пользователей.*

Двухстенное амортизирующее уплотнение Mirage™: уникальное уплотнение позволяет двигаться во время сна и обеспечивает эффективное решение проблемы опускания нижней челюсти.

Конус MicroFit: новая система регулировки лицевого уплотнителя улучшает индивидуальную подгонку и повышает комфортность.

Легкая, бесшумная, удобная для использования: в дополнение к этим преимуществам, маска имеет усовершенствованный дизайн, улучшенную систему вентиляции и много других свойств для удобства применения.

Конус MicroFit

улучшает подгонку и обеспечивает плотное прилегание и повышенный комфорт для более 95% пользователей*

Улучшенный дизайн вентиляционных отверстий

уменьшает шум до минимума

Зажим прокладки имеет выступы


прокладка легко отделяется от корпуса

Подвижность мембраны прокладки в области подбородка

сохраняется герметичность и возможность открывать рот и двигать челюстью



Мембрана прокладки маски – вид сбоку

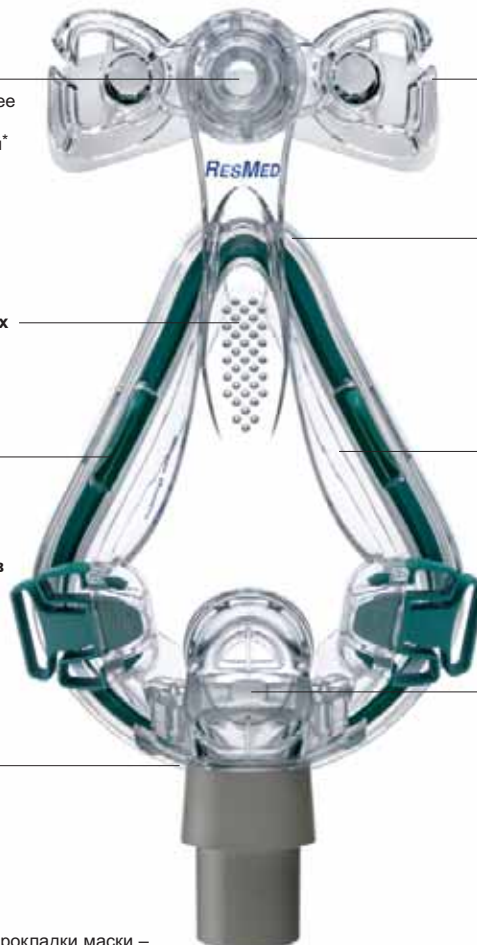

Удобные выемки для крепления наголовника

сохраняется оптимальное положение после первой установки

Подвижность мембраны прокладки в области переносицы

позволяет использовать маску пациентам с разной структурой носа и предотвращать утечку в область глаз

Двухстенное амортизирующее уплотнение Mirage

улучшает плотность прилегания там, где это особенно необходимо

Удобные пряжки для крепления наголовника

позволяют легко снимать маску

Угловой патрубок упрощенной конструкции с клапаном для предотвращения аспиксии (AAV)

меньше деталей для облегчения сборки и разборки; AAV предоставляет дополнительную безопасность в случае прекращения подачи воздуха в маску



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТЛИЧИЕ

Конус MicroFit

Вы можете выбрать одну из 24 позиций – обеспечивается комфортабельная, эффективная установка для более 95% пользователей*

- **Регулируемость:** можно регулировать, когда маска находится на лице
- **Точность:** каждый поворот шкалы регулирует лицевой уплотнитель на небольшой интервал
- **Прогрессивность:** постепенное прилегание к лицу так, чтобы пользователь мог чувствовать, когда достигается максимальный уровень комфорта
- **Действует одновременно с уплотнителем:** конус регулирует угол положения маски по отношению к лицу, а уплотнитель обеспечивает прилегание для достижения герметичности прилегания там, где это необходимо – без необходимости перетягивать ремни наголовника

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Индивидуальный уровень комфорта

- Конус MicroFit позволяет регулировать положение маски в соответствии с индивидуальными особенностями пользователя
- Двухстенное амортизирующее уплотнение облегает контур лица и позволяет осуществлять лицевые движения во время сна (включая опускание нижней челюсти)

Легкая и бесшумная

- Маска улучшенного дизайна не давит на лицо
- Улучшенный дизайн вентиляционных отверстий уменьшает шум

Облегчает использование

- Конус MicroFit и амортизирующее уплотнение помогают обеспечить хорошую подгонку маски – первый раз и каждый раз
- Содержит меньше частей для облегчения применения, чистки, сборки и разборки

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Данная маска подходит для более 95% пользователей*

- Конус MicroFit и амортизирующее уплотнение позволяют регулировать маску для установки на разные типы лица
- Новый уменьшенный размер маски (XS)

Удовлетворение требований и пожеланий потребителей

- Универсальный пакет помощи потребителю, который содержит переносную сумку, диск DVD с инструкциями по уходу за маской, руководство по быстрой установке и руководство для пользователя
- Увеличивается восприятие терапии после первоначальной правильной установки
- Индивидуальная регулировка, комфортность и герметичность способствуют продолжительному применению
- Упрощенная конструкция деталей помогает быстро собирать и разбирать маску

Экономия затрат и времени

- Число частей сокращено: на 33% меньше инвентаризационных кодов, чем для ороназальной маски Ultra Mirage™ и меньше составных частей
- Установка и обучение пользованию маской занимает меньше времени: прокладка улучшенной конструкции обеспечивает быстрое прилегание
- Меньше ответных звонков: легко применять и устанавливать

КОДЫ ПРОДУКТА

Ороназальная маска Mirage Quattro

Европа 1 ¹	
Уменьшенная	61204
Маленькая	61205
Средняя	61206
Большая	61207

Европа 2 ²	
Уменьшенная	61208
Маленькая	61209
Средняя	61210
Большая	61211

Европа 3 ³	
Уменьшенная	61228
Маленькая	61229
Средняя	61230
Большая	61231

Франция	
Уменьшенная	61220
Маленькая	61221
Средняя	61222
Большая	61223

Соединенное Королевство	
Уменьшенная	61224
Маленькая	61225
Средняя	61226
Большая	61227

Азиатско-Тихоокеанский регион	
Уменьшенная	61216
Маленькая	61217
Средняя	61218
Большая	61219

Австралия и Новая Зеландия	
Уменьшенная	61212
Маленькая	61213
Средняя	61214
Большая	61215

¹ Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский, Португальский и Голландский

² Английский, Шведский, Норвежский, Датский, Финский, Венгерский, Польский и Греческий

³ Английский, Русский, Турецкий, Чешский, Эстонский, Словенский, Словацкий, Болгарский, Румынский, Латвийский и Литовский

* Источник: внутренние антропометрические данные фирмы ResMed